

JEDNODUCHÝ SPÔSOB AKO ŽIVIŤ VAŠICH PACIENTOV



Používajte ucelený systém produktov
Flocare® ENFit™

NUTRICIA
flocare®

PREČO KOMPLETNÝ SYSTÉM?



BEZPEČNEJŠIE

Eliminácia možných zlyhaní ľudského faktora

Používaním kompletného systému Flocare® ENFit™ eliminujete možnosť chybného pripojenia.



RÝCHLEJŠIE

Navzájom kompatibilný

Používaním kompletného systému Flocare® ENFit™ aplikačný materiál prepojíte jednoducho a rýchlo.



ĽAHŠIE

Bez dodatočných konektorov

Systém Flocare® ENFit™ je navzájom kompatibilný. Pri používaní kompletného systému Flocare® ENFit™ sa vyhnete ťažkostiam spojeným s výberom vhodných konektorov pre rôzne použitia.



ŠTANDARDIZOVANÝ

Zameraný na zvýšenie bezpečnosti a kvality starostlivosti o pacientov

Používanie bezpečnejších výrobkov a postupov je súčasťou akreditačných noriem v zdravotníckych zariadeniach.

UĽAHČITE SI PRÁCU A MAJTE ISTOTU, ŽE PACIENT JE V BEZPEČÍ.
Používajte ENFit™ u všetkých aplikačných materiálov pre podávanie enterálnej výživy.

Vysvetlivky:



Výmena najneskôr
po 24 hodinách



Bez obsahu ftalátov
a latexu



CE certifikácia zdravotníckej
pomôcky



Pre živenie gravitačným
spádom



Pre enterálnu pumpu
Floca^{re} Infinity™



Pre enterálnu pumpu
Floca^{re} 800



Transnazálna sonda



Perkutánná sonda



Živenie do žalúdka



Živenie do jejunu



Pre detských pacientov



Pre strednodobé živenie
po dobu najdlhšie 8 týždňov





Pre dlhodobé živenie
(predpokladaná doba živenia
viac ako 2-3 týždne)

Medzinárodné farebné kódovanie Charriére:



NUTRICIA
floca^{re}

APLIKAČNÉ SETY

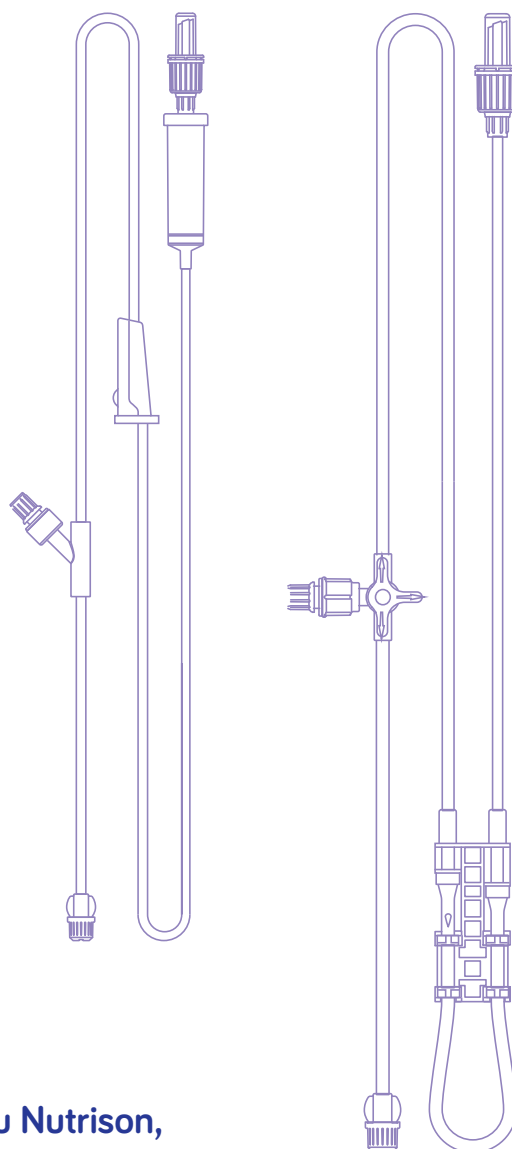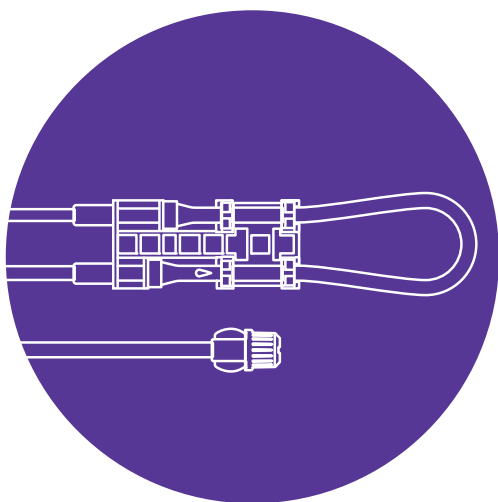

Sety Flocare® spoľahlivo podávajú enterálnu výživu Nutrison, Nutrini a ďalšiu. Sú moderné, praktické a vyrobené z materiálov šetrných k zdraviu i životnému prostrediu. Identifikujete ich okrem iného vďaka fialovému odtieňu hadičiek.

- odolné a spoľahlivé
- fialová farba pre optické odlíšenie
- komfortné materiály
- bez obsahu latexu a DEHP
- so systémom konektorov ENFit™

GRAVITAČNÉ SETY

S
E
T
Y

Dávkovanie s prehľadom
Transparentná kvapkacia
komôrka (20 kvapiek = 1 ml)

Presné dávkovanie
Ľahko ovládateľný
regulátor prietoku

Fialová farba hadičiek
Pre optické odlíšenie systému
pre podávanie enterálnej výživy

ENFit™
Bezpečnosť a konektivita
S ENFit™ konektorom


Y medikačný port

Ľahký prietok výživy
Vnútorný priemer
hadičky – 3,9 mm

- Spoľahlivé gravitačné sety pre podávanie enterálnej výživy s dĺžkou 180 cm.
- Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných materiálov bez obsahu latexu a DEHP.
- Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň ochrany zdravia pacienta.
- Dostupné v samostatných verziách pre vaky a pre fľaše.



Flocare® Gravity Bottle Set

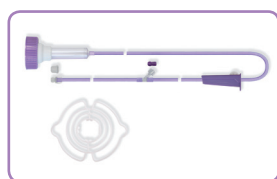


Gravity Bottle Set ENFit™
Kód ZP: P96622
REF: 590070

- Podanie výživy do sondy z fliaš
- Pre hrdlo Ø 40 / 26 mm
- S medikačným portom

Kompatibilný s fľašami:
Nutrison 500 ml
Infatrini 125 ml
Infatrini Peptisorb 200 ml



Flocare® Gravity Pack Set

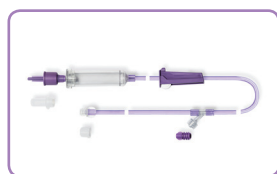


Gravity Pack Set ENFit™
Kód ZP: P96621
REF: 586460

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- S medikačným portom

Kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami
OpTri bottle: Nutrison



Sety na pumpu Flocare® Infinity™

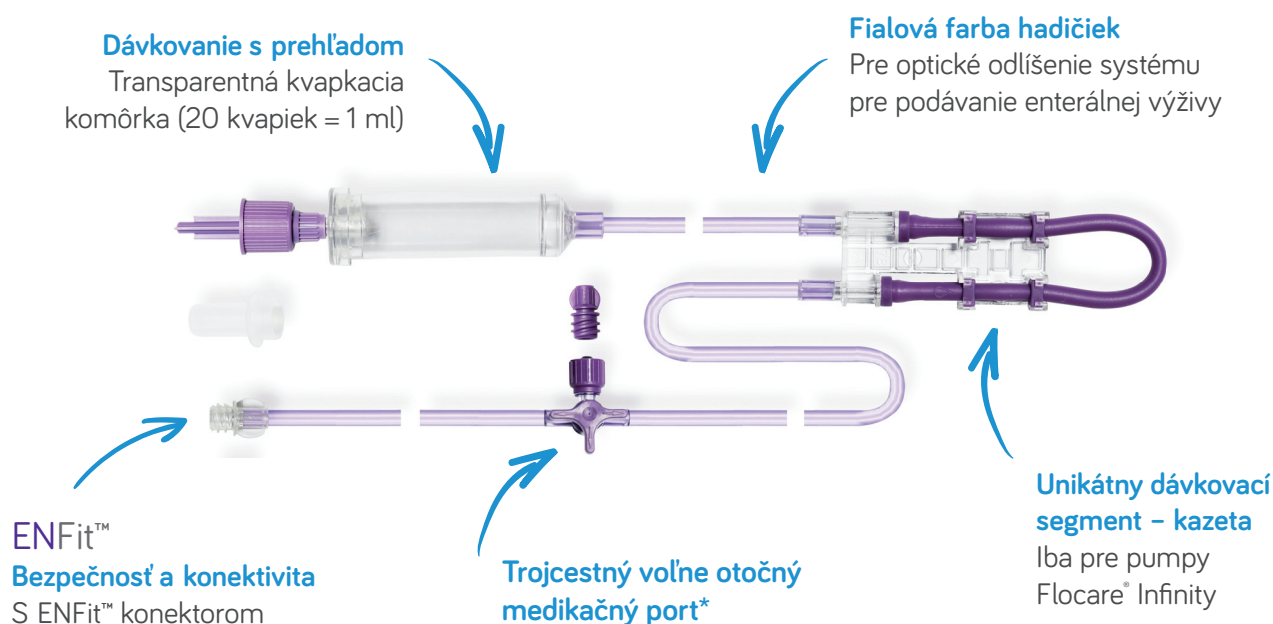

- Spoľahlivé moderné sety pre podávanie enterálnej výživy pomocou pumpy Flocare® Infinity™.
- Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných materiálov bez obsahu latexu a DEHP.
- Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň ochrany zdravia pacienta.
- Dostupné v bežnom a mobilnom variante.



Flocare® Infinity™ Pack Set




Infinity™ Pack Set ENFit™
Kód ZP: P96623
REF: 586514

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- Dĺžka setu 230 cm
- S medikačným portom

Kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami OpTri bottle:
Nutrison



Flocare® Infinity™ Pack Set Mobile W/O MP

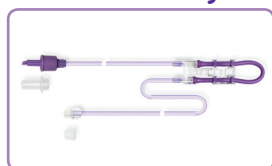

Infinity™ Pack Mobile Set W/O MP ENFit™
Kód ZP: P96624
REF: 586484

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- Dĺžka setu 158 cm
- Bez medikačného portu

Kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami OpTri bottle:
Nutrison



*Není u verze mobile W/O MP

Sety na pumpu Flocare® 800

S
E
T
Y

Fialová farba hadičiek

Pre optické odlišenie systému
pre podávanie enterálnej výživy

Dávkovanie s prehľadom

Transparentná kvapkacia
komôrka (20 kvapiek = 1 ml)

ENFit™

Bezpečnosť a konektivita

S ENFit™ konektorom

Y medikačný port


Dávkovací segment

Kompatibilný s pumpami
Flocare® 800

- Spoľahlivé moderné sety pre podávanie enterálnej výživy pomocou pumpy Flocare® 800.
- Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných materiálov bez obsahu latexu a DEHP.
- Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň ochrany zdravia pacienta.
- Dostupné v samostatných verziách pre vaky a pre fľaše.



Flocare® 800 Bottle Set

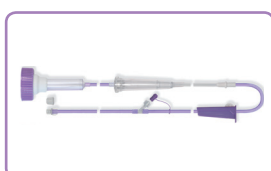

800 Bottle Set ENFit™
Kód ZP: P96620
REF: 590082

- Podanie výživy do sondy z fliaš
- Dĺžka setu 230 cm
- S medikačným portom

Kompatibilný s fľašami:

Nutrison 500 ml
Infatrin 125 ml
Infatrin Peptisorb 200 ml



Flocare® 800 Pack Set



Infinity™ Pack Mobile Set
W/O MP ENFit™
Kód ZP: P96624
REF: 586484



- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- Dĺžka setu 230 cm
- S medikačným portom

Kompatibilný s vakmi:

Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami
OpTri bottle: Nutrison



APLIKAČNÉ SONDY

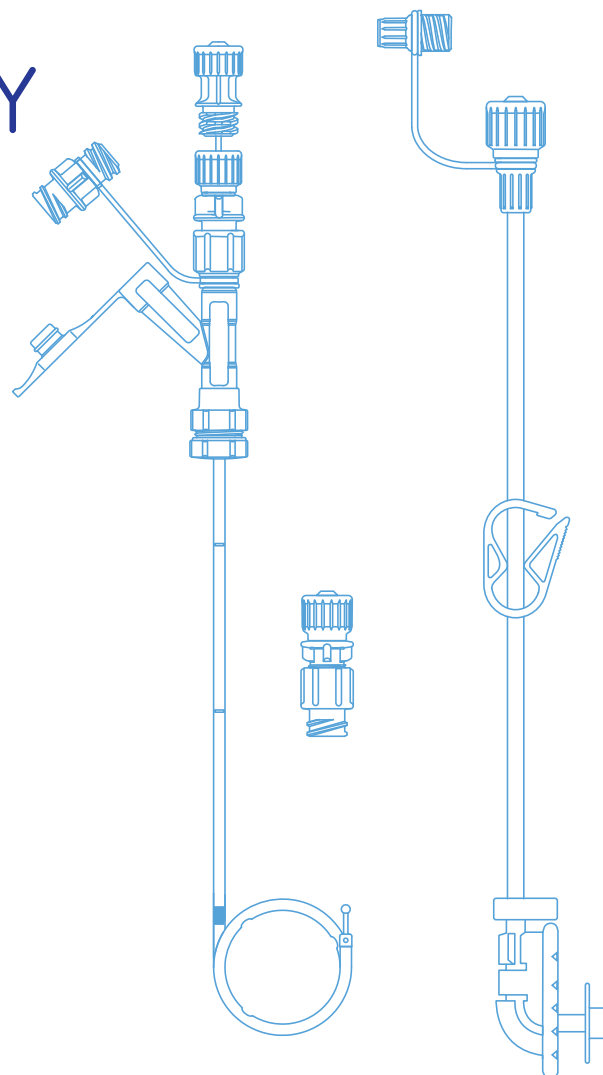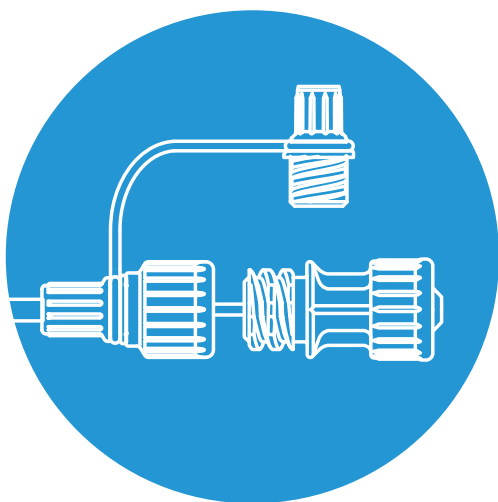


Sondy Flocaire® sú moderné a spoľahlivé zdravotnícke pomôcky pre podanie enterálnej výživy, vyvinuté a vyrábané so zameraním na komfort pacienta a uľahčenie práce pre zdravotníkov. Sú vyrobené z materiálov šetrných k zdraviu i životnému prostrediu.

- odolný, komfortný a poddajný materiál
- zaoblené zakončenie pre jednoduché zavedenie
- bez obsahu latexu a DEHP
- so systémom konektorov ENFit™
- dlhodobá skladovateľnosť

Flocare® transnazálne sondy


S
O
N
D
Y

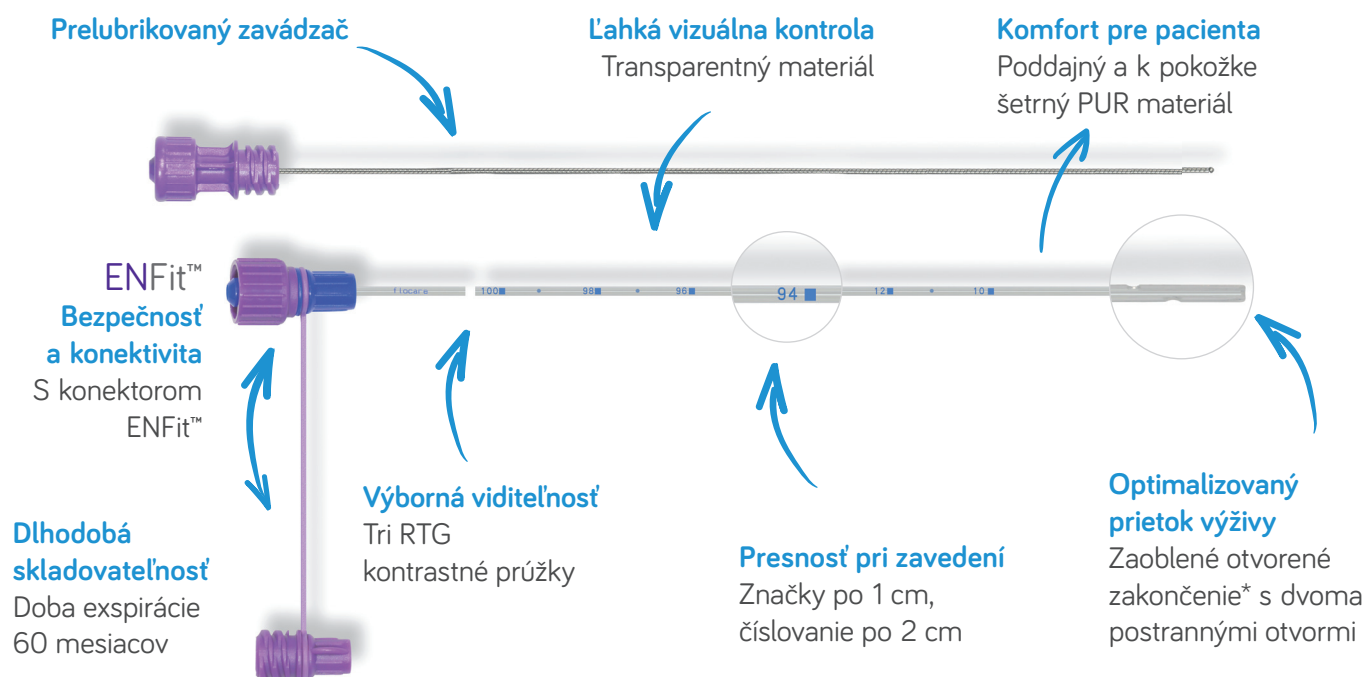

- Nazogastrická RTG kontrastná polyuretánová sonda so zavádzačom a konektorom ENFit™ pre optimálne strednodobé živenie do žalúdka (≤ 8 týždňov).
- Ľahko sa zavádza a prináša maximálny komfort pre pacienta.



8 Flocare® tube PUR CH 8/110 ENFit

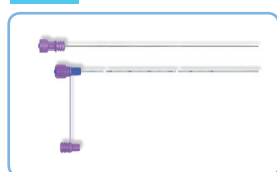

Kód ZP: P22157
REF: 594569

- Nazogastrická sonda
- S otvoreným zakončením
- Priesvit CH 8
- Dĺžka sondy 110 cm



Flocare® Bengmark® sondy

Výborná viditeľnosť

Tri RTG kontrastné pružky

Dĺžka sondy 145 cm

Prelubrikovaný zavádzač

Komfort pre pacienta

Poddajný a k pokožke
šetrný PUR materiál

ENFit™

Bezpečnosť a konektivita

S konektorom
ENFit™

Dlhodobá skladovateľnosť

Doba expirácie
60 mesiacov

Presnosť pri zavedení

Značky po 1 cm,
číslovanie po 2 cm

Jednoduché zavedenie

Gulôčkové zakončenie
pokryté vrstvou
Hydromer®

Optimálna fixácia sondy


Patentovaná špirála
Bengmark® s 2,5
slučkami o priemere
cca 3 cm a dĺžke 23 cm

- Nazointestinálna rádiokontrastná polyuretánová sonda s dĺžkou 145 cm, so zavádzačom a konektorom ENFit™.
- Vhodná pre transnazálne živenie priamo do duodena alebo jejuna.
- Určená pre strednodobé živenie pacientov (≤ 6-8 týždňov).
- Lahko sa zavádza a prináša maximálny komfort pre pacienta.
- Dostupná v 2 variantoch priesvitu.



8

Flocare® Bengmark® Tube CH 8 – 145 cm

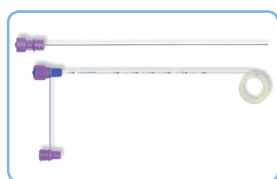

Kód ZP: P76735
REF: 594824



Indikácie sondy Flocare® Bengmark®


Táto sonda je indikovaná pre pacientov s funkčným intestinálnym traktom s oslabenou motilitou žalúdka a/alebo zvýšeným rizikom aspirácie (napr. v ranom pooperačnom období).

Indikácie pre postpylorickú sondovú výživu:

- Chirurgickí pacienti
- Pacienti s popáleninami
- Pacienti so zvýšeným rizikom aspirácie, refluxu a/alebo vracania
- Pacienti s obmedzenou motilitou žalúdka
- Pacienti s akútnou pankreatitídou

10

Flocare® Bengmark® Tube CH 10 – 145 cm

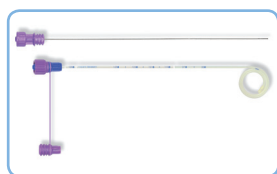


Kód ZP: P76735
REF: 594825



Návod na použitie

- 1 Vodiaci drôt celkom zasunúť do sondy a uistiť sa, že je pevne uchytený ku konektoru (obr. 1). Informujte pacienta o postupe zavedenia.
- 2 Pacienta umiestnite do pohodlnej polohy posediačky alebo pololežiačky. Pre stanovenie dĺžky sondy Bengmark®, ktorá má byť zavedená, zmerajte vzdialenosť od špičky nosa (A) k uchu (B) a následne k mečovitému výbežku hrudnej kosti (C) – (obr. 2). Sondy v tomto bode označte. Potom urobte dve ďalšie značky 25 cm a 50 cm za prvou značkou.
- 3 Koniec sondy navlhčite vodou pre ľahšiu intubáciu (obr. 3).
- 4 Určite si vhodnú nosnú dierku a sondu zasunúť cez spodnú časť nosnej dierky (obr. 4). V okamžiku, kedy sonda dosiahne oblasť krku, predkloňte hlavu pacienta a požiadať ho, aby prehltal tak často, ako je to možné. Sondy tlačte jemne dopredu, nie silou. Vyvarujte sa nechcenému zasunutiu sondy do trachey! Pokračujte, pokiaľ sa nedostanete k prvej vopred vyznačenej značke. Pozor! V tejto fáze nespájajte nazointestinálnu sondu Bengmark® s výživovým setom (obr. 5). Predtým než sondou prejde akákoľvek tekutina, je treba overiť jej správne umiestnenie.
- 5 Po kontrole umiestnenia sondy (obr. 6, 7, 8) aplikujte najmenej 20-50 ml vody (obr. 9).
- 6 Vytiahnite ± 25 cm vodiaceho drôtu zo sondy (obr. 10). Potom pokračujte v zavádzaní sondy, kým nedosiahnete druhú značku (obr. 11). Teraz vytiahnite celý vodiaci drôt.
- 7 Sondy ešte nepripevňujte k nosu, dočasne použite na fixáciu ucho.
- 8 V priebehu 8-12 hodín motilita žalúdka posunie sondu cez pylorus (obr. 12). Zafixujte sondu len čo sa tretia značka sondy ukáže pri pacientovom nose (obr. 13).
- 9 Pred podaním akejkoľvek enterálnej výživy overte správne umiestnenie sondy prostredníctvom RTG (obr. 14).

- Podaním nápoja či jedla môžete pozitívne stimulovať pohyb sondy. V prípade potreby (napr. u pediatrických pacientov), je možné dĺžku sondy skrátiť a nasunúť nový Flocare™ konektor s rovnakým Charrière.
- Polohu sondy kontrolujte vždy pri výmene výživy, vždy v prípade pochybností o správnom umiestnení sondy a najmenej 3x denne (obr. 6, 7, 8).
- Sondy preplachujte 20-50 ml vody (obr. 15) pred a po podaní výživy alebo liekov a najmenej každých 8 hodín, aby ste predišli upchatiu sondy.
- Odporúča sa zaviesť novú sondu Flocare® Bengmark® každých 6-8 týždňov (obr. 16).
- Pri aplikácii výživy do čreva sa odporúča vždy používať enterálnu pumpu, aby bolo možné kontrolovať prietok.
- V prípade zachovanej motility žalúdka je možné sondu umiestniť i do žalúdka (preštudujte si príslušné pokyny na použitie), špirála Bengmark® podporuje spontánnu pasáž potravy cez pylorus v rozpätí 8-12 hodín.
- Pokiaľ je u daného pacienta výrazne obmedzená alebo žiadna žalúdočná motilita, sondu je možné presunúť cez pylorus ďalej pomocou alternatívnej techniky, napr. s využitím endoskopie alebo fluoroskopie. Alternatívne je možné žalúdočnú motilitu zlepšiť prostredníctvom medicíny.
- Sondy Flocare® Bengmark® je možné vyňať jemným vytiahnutím z pacientovho nosa. Vyňatie sondy je treba vždy vykonať pod lekárskej dohľadom.

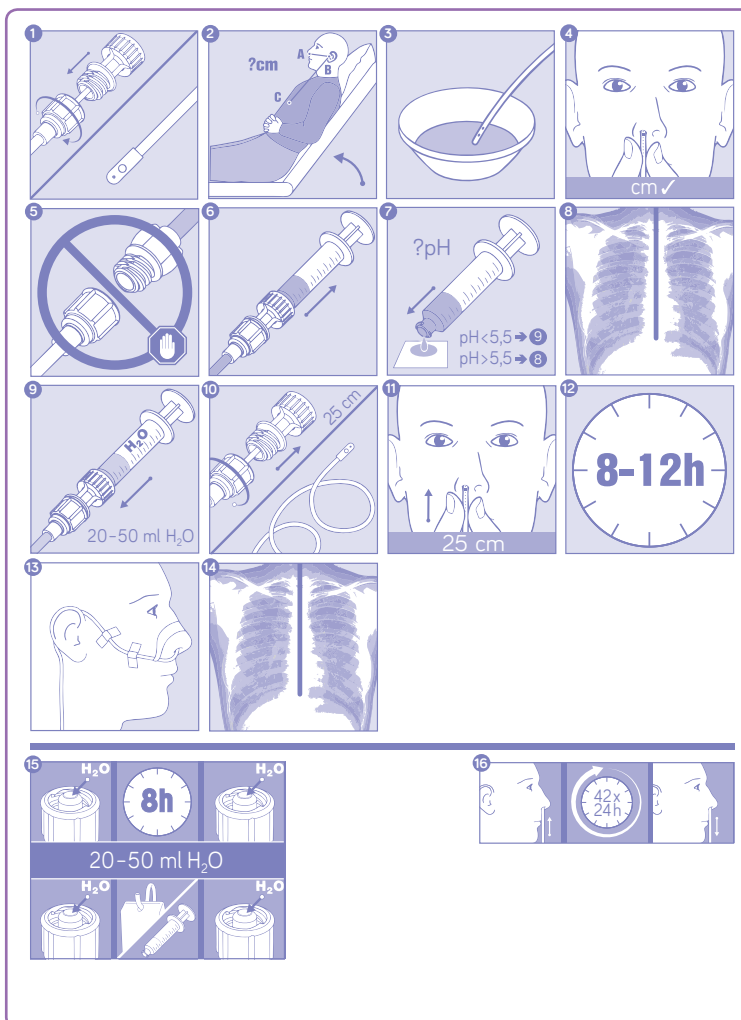

Flocare® PEG sondy

Jednoduché zavedenie

Zakončenie pokryté vrstvou Hydromer®

Komfort pre pacienta

Veľmi trvanlivý, poddajný a k pokožke šetrný materiál.

Výborná viditeľnosť

Tri RTG kontrastné pružky

Presnosť pri zavedení

Značky po 1 cm, číslovanie po 2 cm

ENFit™

Mimoriadna bezpečnosť

Modrá fixačná svorka a konektor ENFit™




Kvapkovitý tvar silikónového vonkajšieho kotúča

Dlhodobá skladovateľnosť

Doba expirácie 60 mesiacov

- Súprava Flocare® PEG pre perkutánnu endoskopickú gastrotómiu (PEG) je určená na zavedenie pomocou techniky „pull“, pri súčasnej endoskopickej kontrole.
- Zavedenie sondy PEG je indikované pri dlhodobom podávaní výživy pomocou sondy a pri žalúdočnej dekompresii.
- Dĺžka sondy 40 cm, dostupná vo verziách CH 10, CH 14 a CH 18.
- Sondu CH 18 je možné využiť tiež pre zavedenie PEG/ J.

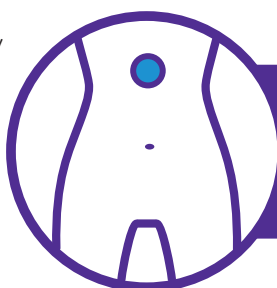

10 Flocare® PEG Set CH 10



Kód ZP: P76734
REF: 594820



14 Flocare® PEG Set CH 14



Kód ZP: P76734
REF: 594821



18 Flocare® PEG Set CH 18



Kód ZP: P76734
REF: 594822




Súčasťi súpravy:

- 1 Transparentná PUR sonda s dĺžkou 40cm, vnútorný silikónový fixačný disk
- 2 Vonkajší silikónový kotúč pre maximálne pohodlie pacienta
- 3 Modrá fixačná svorka sondy
- 4 Skalpel
- 5 Zavádzacia ihla s trokarom
- 6 Drôt s očkom pre pohodlné a bezpečné napojenie na slučku sondy
- 7 ENFit™ konektor pre podávanie výživy
- 8 Rýchlo uvoľniteľná svorka


Náhradné PEG konektory dostupné ako samostatné diely (viď str. 18):
Flocare® PEG konektor CH 10 / CH 14 / CH 18

Flocare® PEG/J sondy


SONDY

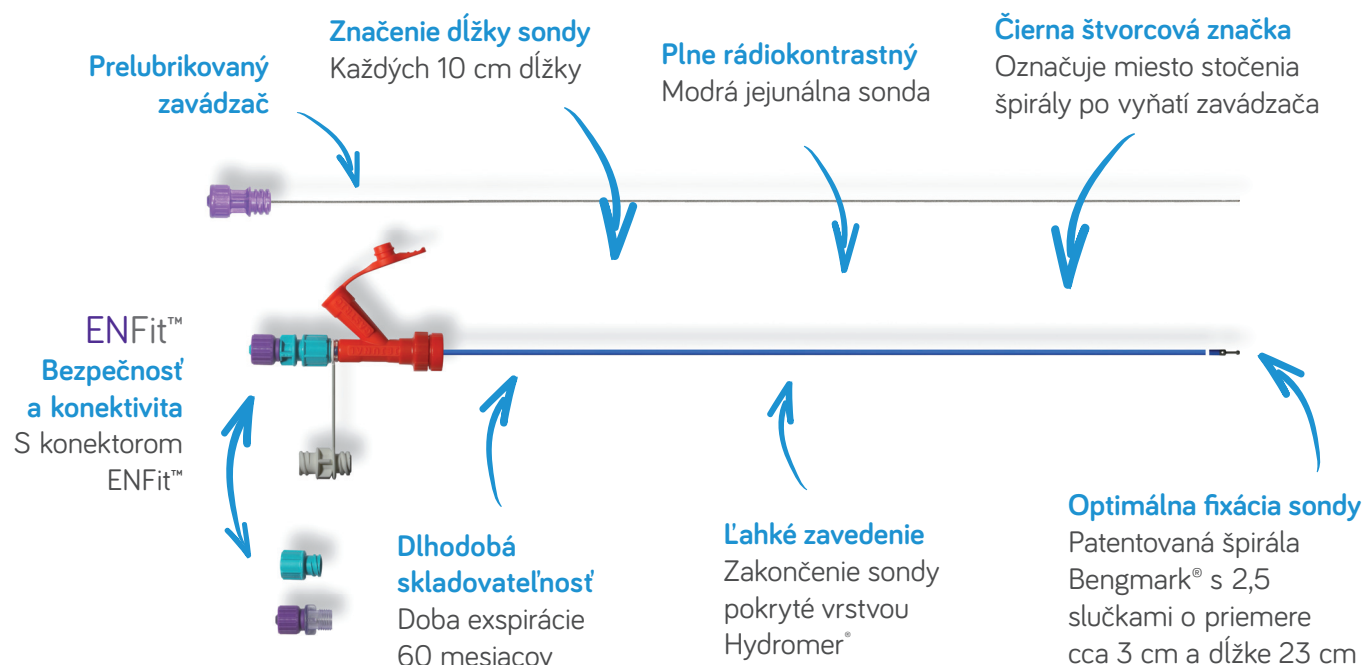

- Polyuretánová modrá sonda CH 9 s dĺžkou 105 cm, určená na endoskopické umiestnenie do jejuna cez sondu PEG CH 18.
- So zavádzačom, bengmarkovou špirálou a anténym zakončením sondy.
- S konektorom ENFit™.
- SONDA PEG/J je určená na dlhodobé živenie do jejuna.
- Výhoda použitia PEG/J sondy je predovšetkým v diskretnom umiestnení pod odevom pacienta a vyhnutiu sa podráždeniu pokožky v okolí nosa.

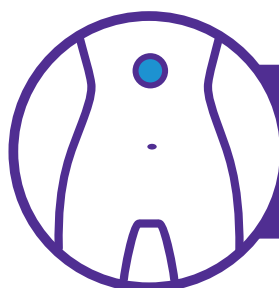

9 Flocare® Bengmark® PEG/J ENFit CH 9

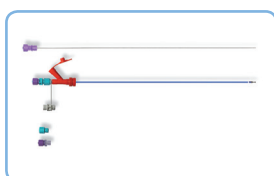


Kód ZP: P76737
REF: 594823



Časti sondy:

Sonda (A), anténne zakončenie s dvoma bočnými otvormi (B), prelubrikovaný kovový zavádzač, čiastočne zasunutý do sondy (C) ENFit™ konektor: fialová (D) a tyrkysová (E) časť umožňujú spojenie jejunálnej sondy s Y-konektorom. Gastrické ústie Y konektora (F) je vybavené lievikovitým konektorom, ktorý umožňuje spojenie stupňovitého konektora s drenážnym vakom. Jejunálne ústie Y-konektora (G) je zostavené a pripojené k jejunálnej sonde Y-konektora (červený): umožňuje dekompresiu žalúdka (aspiráciu žalúdočného obsahu) a zároveň živenie do tenkého čreva. Y-konektor zahŕňa vnútorný neoddeliteľný krúžok (H) pre pripojenie k súprave PEG, a ďalej samostatný – oddeliteľný, červený krúžok – matičku (I) pre pevnú fixáciu spojenia s PEG. Tyrkysový krúžok (J) v hornej časti Y-konektora umožňuje spojenie s jejunálnou sondou. Náhradné konektory pre fixáciu po umiestnení sondy do jejuna: transparentná (K) a tyrkysová časť (L)

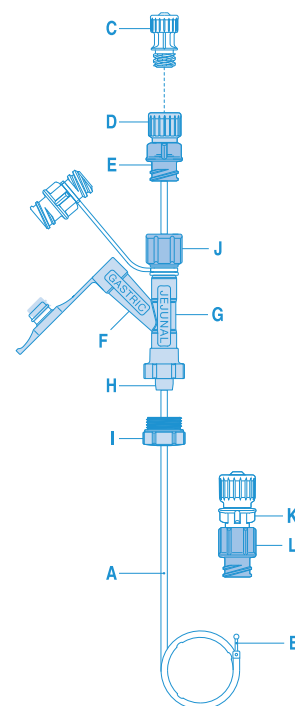


NUTRICIA
flocare®


POMÔCKY PRE APLIKÁCIU ENTERÁLNEJ VÝŽIVY



Ostatné pomôcky
a príslušenstvo

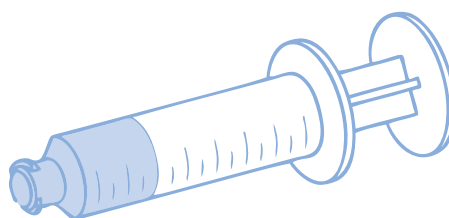

Enterálna pumpa
Flocare® Infinity™

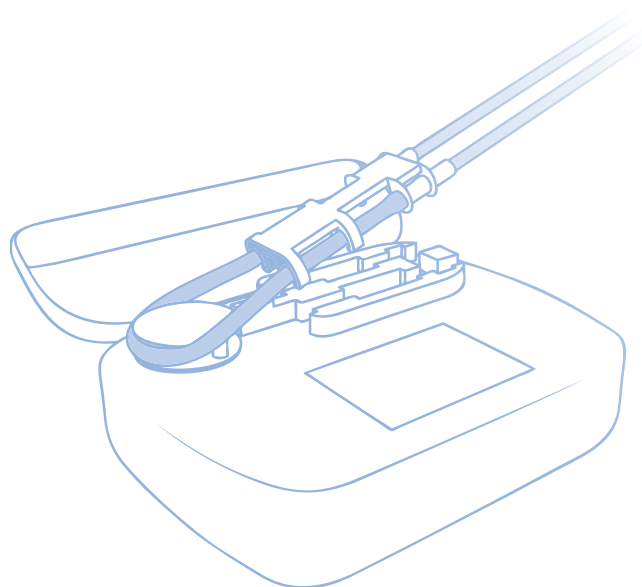


- malá, kompaktná, praktická
- spoľahlivé, bezpečné a jednoduché použitie
- výdrž batérie 24 hodín
- ľahko umývateľná i pod tečúcou vodou
- zákaznícka podpora

(pravidelné technické kontroly a servis)

Enterálna pumpa Flocare® Infinity™

POMÔCKY

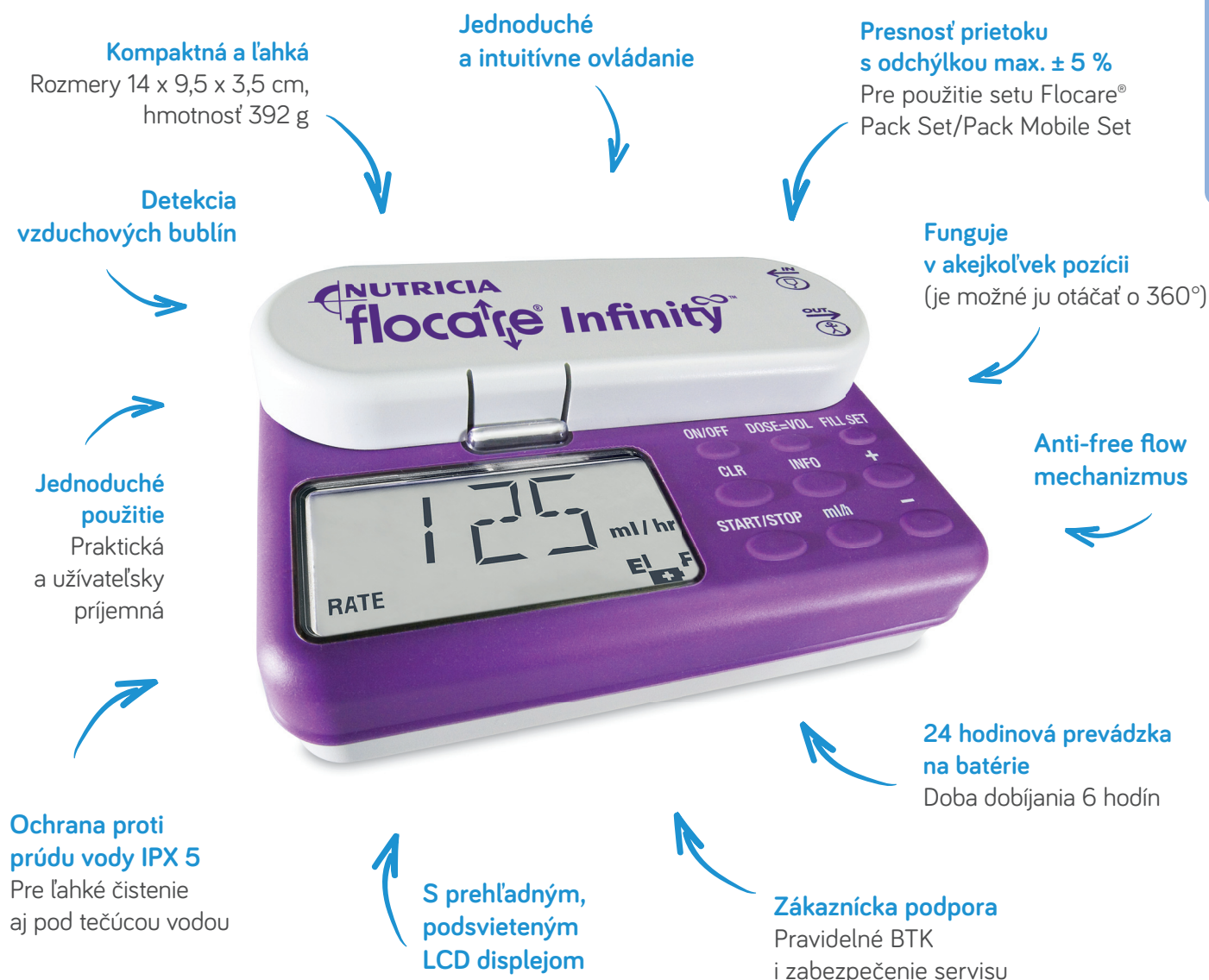


Enterálna pumpa Flocare® Infinity™

Pumpa je určená na aplikáciu enterálnej výživy iba prostredníctvom týchto aplikačných setov:




Kód ZP: P85008
REF: 35676

- Flocare® Infinity™ Pack Set (586 514)
Kód ZP: P96623

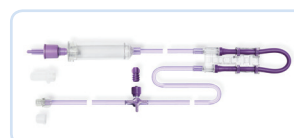

- Flocare® Infinity™ Pack Mobile Set W/O MP ENFit™ (586 484)
Kód ZP: P96624

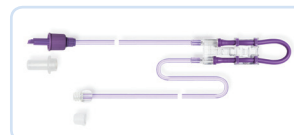

Prehľad konektorov a adaptérov

Bolusový adaptér na striekačku ENFit™

- Adaptér na hrdlo vaku umožňuje natiahnutie bolusovej dávky enterálnej výživy priamo z vaku do striekačky ENFit™.

Bolusový adaptér na ENFit™ striekačku 60 ml



Kód ZP: P98779
REF: 589 740

● Balenie 1 ks

Adaptér na fľašu

- Adaptér je určený na podanie sondovej enterálnej výživy z fliaš s hrdlom Ø 40 mm a Ø 26 mm. Je kompatibilný s fľašami prípravku Infatrini 125 ml, Infatrini Peptisorb 200 ml a Nutrini 200 ml.

Flocare® Univerzálny adaptér



REF: 570 063

● Balenie 1 ks

Nutricia Flocare® PEG konektory

- Náhradné konektory pre aplikáciu výživy do PEG s ENFit™ konektorom. Kompatibilné s Nutricia Flocare ENFit™ enterálnou striekačkou i výživovými setmi.

Flocare® PEG konektor 10 CH 10



Kód ZP: P98780
REF: 591397

● Balenie 1 ks

Flocare® PEG konektor 14 CH 14



Kód ZP: P98780
REF: 591395

● Balenie 1 ks

Flocare® PEG konektor 18 CH 18



Kód ZP: P98780
REF: 591396

● Balenie 1 ks

Prechodné konektory

- Prechodné konektory Nutricia Flocare® zaisťujú kompatibilitu systému ENFit™ s ostatnými systémami enterálnej výživy

Transition stupňovitý konektor



REF: 589828

● Balenie 30 ks (6×5 ks)

Transition konektor na sondu Luer



REF: 589733

● Balenie 30 ks (6×5 ks)

Transition konektor na striekačku Oral/Luer



REF: 589738

● Balenie 30 ks (6×5 ks)

Transition konektor na set Luer




REF: 589735

● Balenie 30 ks (6 × 5 ks)

Prehľad produktov

Názov produktu	Obrázok produktu	Kód ZP	REF kód	Balenie
Nutricia Flocare® vyživovacie sety				
Flocare Gravity Bottle Set ENFit		P96622	590 070	1 ks
Flocare Gravity Pack Set ENFit		P96621	586 460	1 ks
Flocare 800 Bottle Set ENFit		P96620	590 082	1 ks
Flocare 800 Pack Set ENFit		P96619	586 512	1 ks
Flocare Infinity Pack Set ENFit		P96623	586 514	1 ks
Flocare Infinity Pack Mobile Set W/O MP ENFit		P96624	586 484	1 ks
Nutricia Flocare® PEG sety				
Flocare PEG Set ENFit CH 10		P76734	594 820	1 ks
Flocare PEG Set ENFit CH 14		P76734	594 821	1 ks
Flocare PEG Set ENFit CH 18		P76734	594 822	1 ks
Nutricia Flocare® sondy Bengmark®				
Flocare Bengmark Tube CH 8-145 cm		P76735	594 824	1 ks
Flocare Bengmark Tube CH 10-145 cm		P76735	594 825	1 ks
Nutricia Flocare® sonda PEG/J				
Flocare Bengmark PEG/J ENFit CH 9		P76737	594 823	1 ks
Nutricia Flocare® sondy				
Flocare Sonda PUR CH 8/110 ENFit		P22157	594569	1 ks
Nutricia ENFit® enterálna striekačka				
ENFit striekačka 60 ml		P97752	624023	1 ks
Nutricia Flocare® enterálna pumpa				
Flocare pumpa Infinity		P85008	35676	1 ks

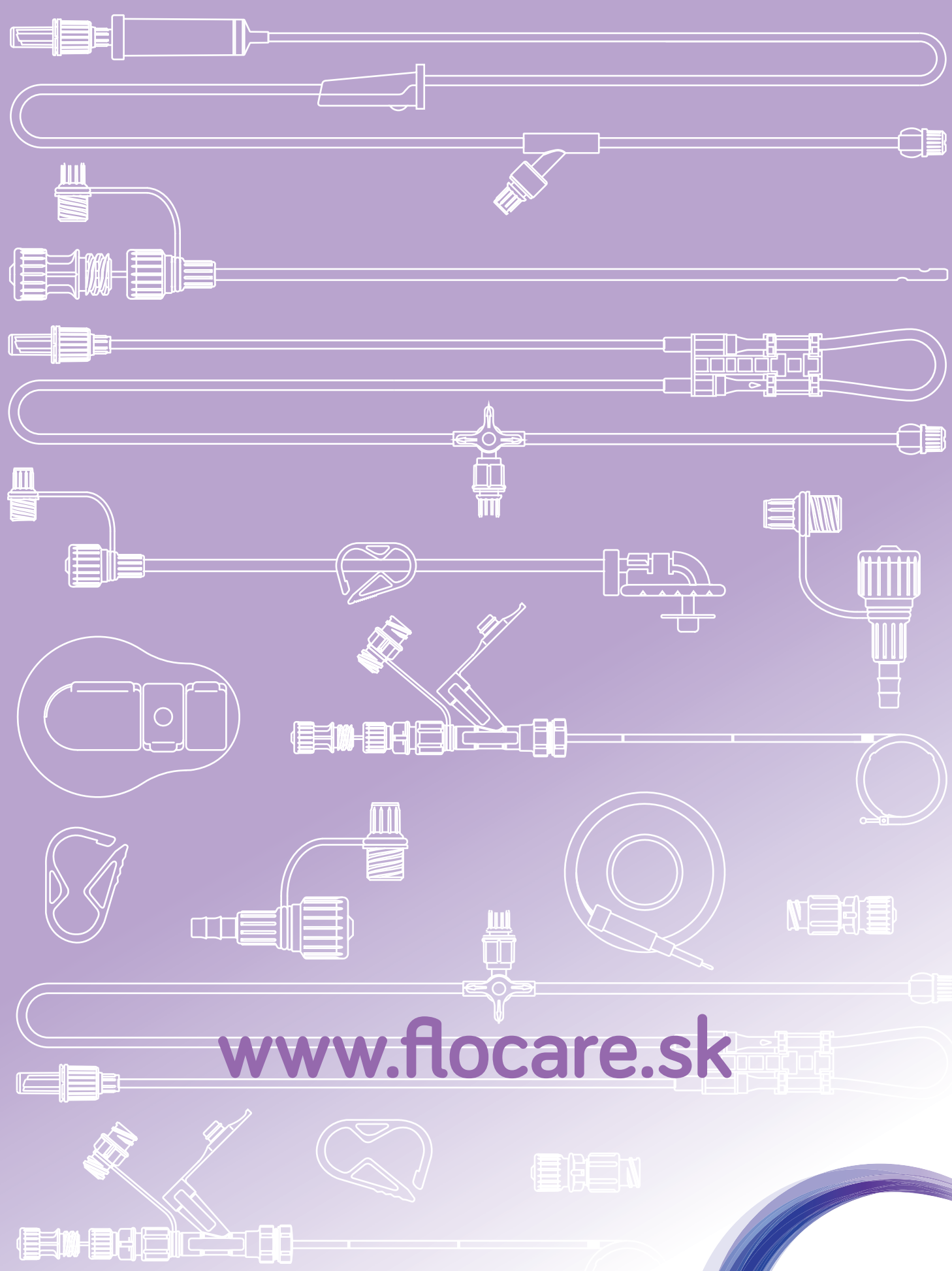

www.flocare.sk

Distribúcia: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava
Infolinka: 0800 444 006, www.flocare.sk

Zdravotnícke pomôcky a aplikačný materiál sú určené na podanie enterálnej výživy.
Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.
Chyby tlače sú vyhradené.

NUTRICIA
flocare[®]