


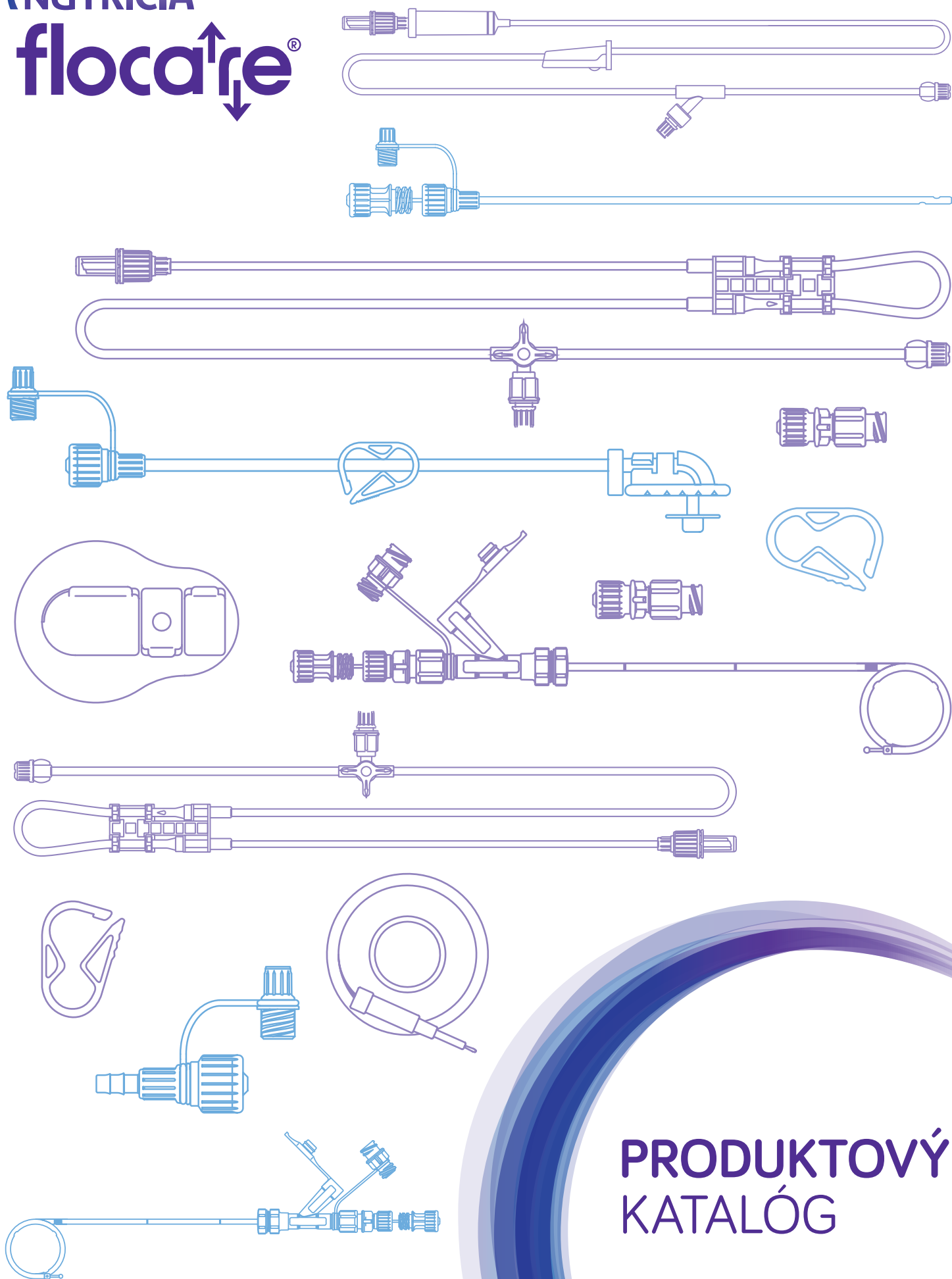

**JEDNODUCHÝ
SPÔSOB
AKO ŽIVIŤ VAŠICH
PACIENTOV**

Používajte ucelený systém produktov
Flocare® ENFit™

ISO 80369-3

Aktuálny štandard
pre bezpečné
enterálne živenie

NUTRICIA
flocare®

PREČO KOMPLETNÝ SYSTÉM?



BEZPEČNEJŠÍ

Eliminácia možných zlyhaní ľudského faktora

Používaním kompletného systému Flocare® ENFit™ eliminujete možnosť chybného pripojenia.



RÝCHLEJŠÍ

Navzájom kompatibilný

Používaním kompletného systému Flocare® ENFit™ aplikačný materiál prepojíte jednoducho a rýchlo.



ĽAHŠÍ

Bez dodatočných konektorov

Systém Flocare® ENFit™ je navzájom kompatibilný. Pri používaní kompletného systému Flocare® ENFit™ sa vyhnete ťažkostiam spojeným s výberom vhodných konektorov pre rôzne použitia.



ŠTANDARDIZOVANÝ

Zameraný na zvýšenie bezpečnosti a kvality starostlivosti o pacientov

Používanie bezpečnejších výrobkov a postupov je súčasťou akreditačných noriem v zdravotníckych zariadeniach.



Spoločnosť Danone s.r.o. má **zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality na zdravotnícke pomôcky** podľa medzinárodnej normy EN ISO 13485:2016.

UĽAHČITE SI PRÁCU A MAJTE ISTOTU, ŽE PACIENT JE V BEZPEČÍ.
Používajte ENFit™ u všetkých aplikačných materiálov pre podávanie enterálnej výživy.

Vysvetlivky:



Výmena najneskôr
po 24 hodinách



Bez obsahu ftalátov
a latexu



CE certifikácia zdravotníckej
pomôcky



Pre živenie gravitačným
spádom



Pre enterálnu pumpu
Flocare® Infinity™



Pre enterálnu pumpu
Flocare® 800



Transnazálna sonda



Perkutánná sonda



Živenie do žalúdka



Živenie do jejunu



Pre detských pacientov



Pre strednodobé živenie
po dobu najdlhšie 6 týždňov



Pre dlhodobé živenie
(predpokladaná doba živenia
viac ako 2-3 týždne)

Medzinárodné farebné kódovanie Charriére:








Nutricia Flocare® obsah:

- Aplikačné súpravy | 6
- Aplikačné sondy | 10
- Pomôcky pre aplikáciu enterálnej výživy | 16
- Prehľad produktov | 19

APLIKAČNÉ SÚPRAVY

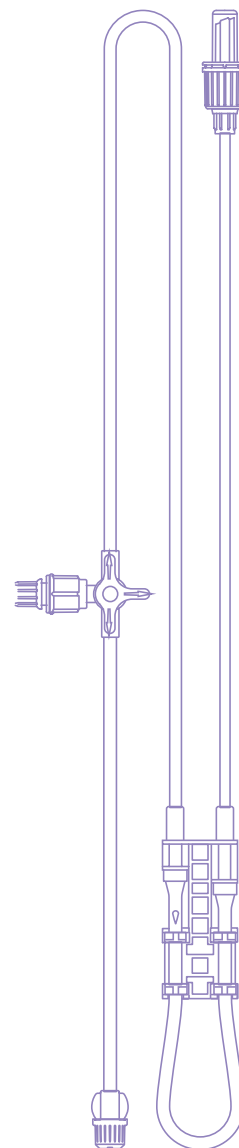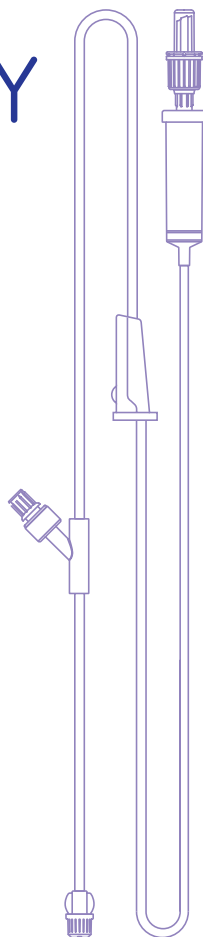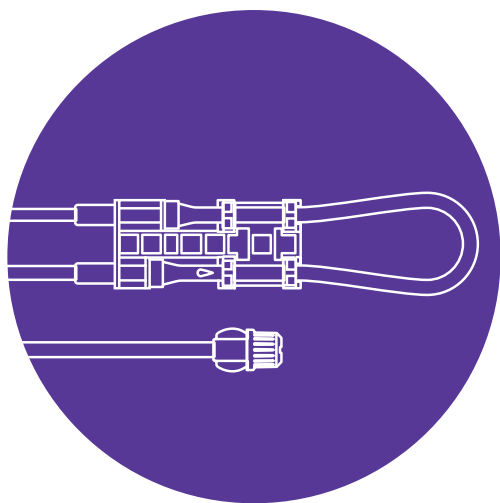


Súpravy Flocaire® sú zdravotnícke pomôcky, ktoré spoľahlivo podávajú enterálnu výživu Nutrison, Nutrini a ďalšiu.

Sú moderné, praktické a vyrobené z materiálov šetrných k zdraviu i životnému prostrediu. Identifikujete ich okrem iného vďaka fialovému odtieňu hadičiek.

- odolné a spoľahlivé
- fialová farba pre optické odlišenie
- komfortné materiály
- bez obsahu latexu a DEHP
- so systémom konektorov ENFit™


GRAVITAČNÉ SÚPRAVY

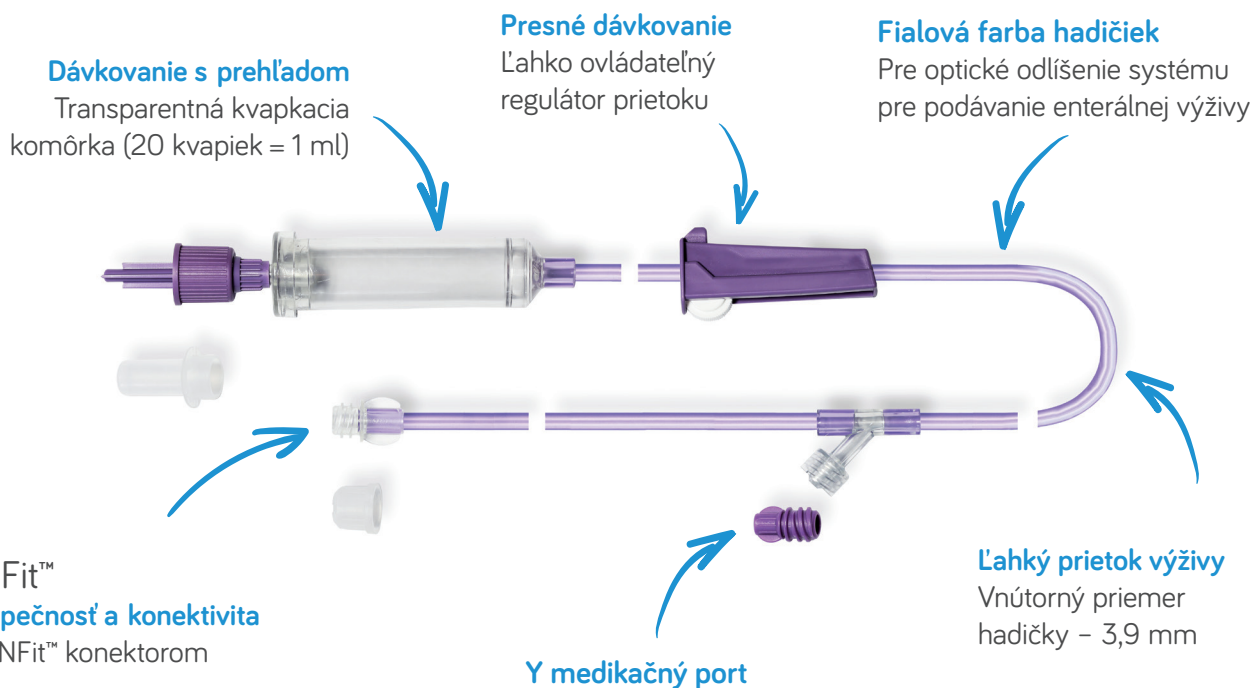

- Spoľahlivé gravitačné súpravy na podávanie enterálnej výživy s dĺžkou 180 cm.
- Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných materiálov bez obsahu latexu a DEHP.
- Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň ochrany zdravia pacienta.
- Dostupné v samostatných verziách pre vaky a pre fľaše.



Flocare® Gravity Bottle Set Súprava gravitačná na fľašu

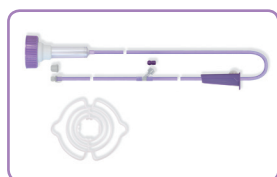

Kód ZP: P96622
REF: 590070

- Podanie výživy do sondy z fliaš
- Pre hrdlo Ø 40 / 26 mm
- S medikačným portom

Kompatibilný s fľašami:

Nutrison 500 ml
Infatrin 125 ml
Infatrin Peptisorb 200 ml



Flocare® Gravity Pack Set Súprava gravitačná na vak



Kód ZP: P96621
REF: 586460

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- S medikačným portom

Kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami
OpTri bottle: Nutrison



Súpravy na pumpu Flocare® Infinity™

Dávkovanie s prehľadom
Transparentná kvapkacia komôrka (20 kvapiek = 1 ml)

Fialová farba hadičiek
Pre optické oddelenie systému pre podávanie enterálnej výživy

ENFit™
Bezpečnosť a konektivita
S ENFit™ konektorom


Trojcestný voľne otočný medikačný port*

Unikátny dávkovací segment – kazeta
Iba pre pumpu Flocare® Infinity

- Spoľahlivé moderné súpravy na podávanie enterálnej výživy pomocou pumpy Flocare® Infinity™.
- Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných materiálov bez obsahu latexu a DEHP.
- Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň ochrany zdravia pacienta.
- Dostupné v bežnom a mobilnom variante.



Flocare® Infinity™ Pack Set Súprava pre pumpu Infinity™ na vak

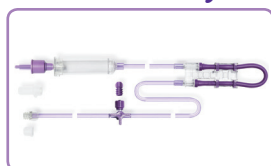

Kód ZP: P96623
REF: 586514


- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- Dĺžka súpravy 230 cm
- S medikačným portom

Kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami OpTri bottle:
Nutrison



Flocare® Infinity™ Pack Mobile Set W/O MP

Súprava pre pumpu na vak mobilná bez portu na podávanie liekov

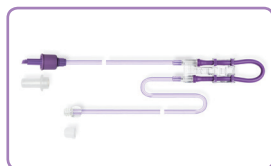

Kód ZP: P96624
REF: 586484

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- Dĺžka súpravy 158 cm
- Bez medikačného portu

Kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami OpTri bottle:
Nutrison



*Nie je u verzie mobile W/O MP


Súpravy na pumpu Flocare® 800

Fialová farba hadičiek

Pre optické odlíšenie systému na podávanie enterálnej výživy

Dávkovanie s prehľadom

Transparentná kvapkacia komôrka (20 kvapiek = 1 ml)

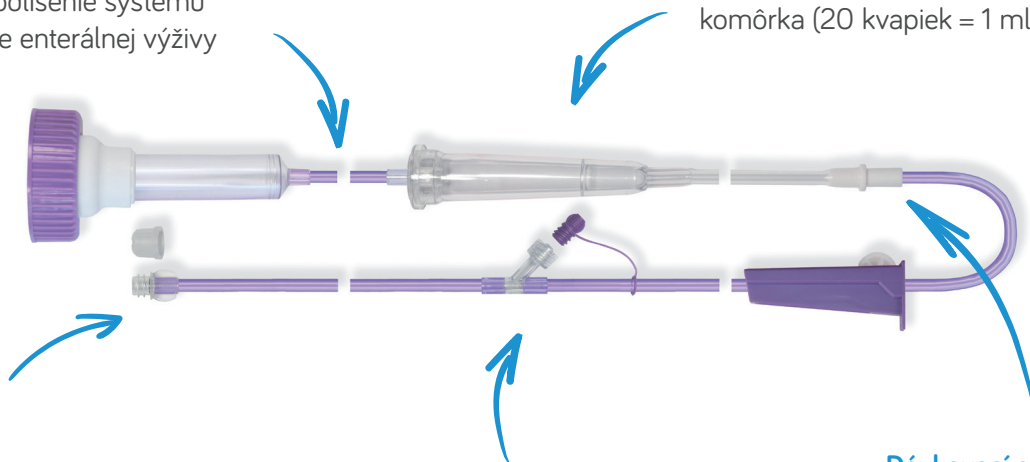

ENFit™

Bezpečnosť a konektivita

S ENFit™ konektorom

Y medikačný port


Dávkovací segment

Kompatibilný s pumpami Flocare® 800

- Spoľahlivé moderné súpravy na podávanie enterálnej výživy pomocou pumpy Flocare® 800.
- Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných materiálov bez obsahu latexu a DEHP.
- Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň ochrany zdravia pacienta.
- Dostupné v samostatných verziách pre vaky a pre fľaše.



Flocare® 800 Bottle Set Súprava pre pumpu Flocare® 800 na fľašu

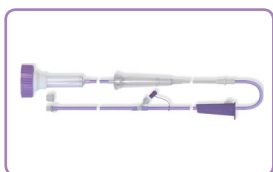

Kód ZP: P96620
REF: 590082

- Podanie výživy do sondy z fliaš
- Dĺžka súpravy 230 cm
- S medikačným portom

Kompatibilný s fľašami:

Nutrison 500 ml
Infatrin 125 ml
Infatrin Peptisorb 200 ml



Flocare® 800 Pack Set Súprava pre pumpu Flocare® 800 na vak



Kód ZP: P96619
REF: 586512

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- Dĺžka súpravy 230 cm
- S medikačným portom

Kompatibilný s vakmi:



Nutrison, Nutriini

Kompatibilný s fľašami

OpTri bottle: Nutrison




APLIKAČNÉ SONDY

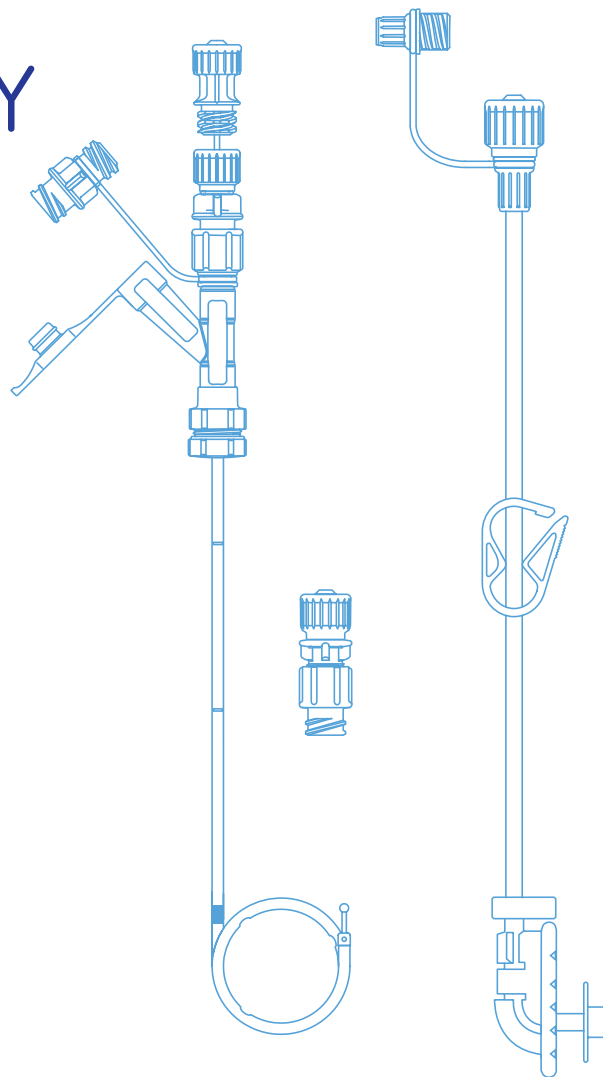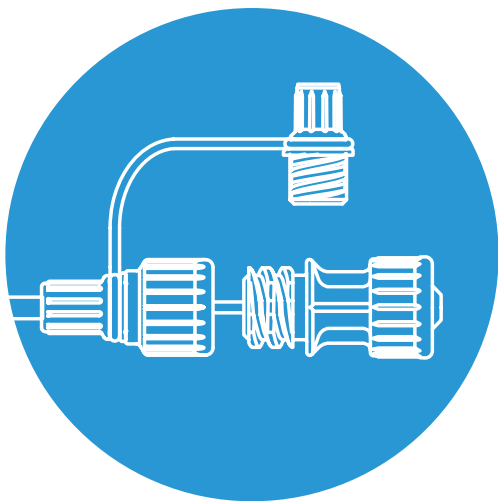

Sondy Flocare® sú moderné a spoľahlivé zdravotnícke pomôcky na podanie enterálnej výživy, vyvinuté a vyrábané so zameraním na komfort pacienta a uľahčenie práce pre zdravotníkov. Sú vyrobené z materiálov šetrných k zdraviu i životnému prostrediu.

- odolný, komfortný a poddajný materiál
- zaoblené zakončenie pre jednoduché zavedenie
- bez obsahu latexu a DEHP
- so systémom konektorov ENFit™
- dlhodobá skladovateľnosť

Flocare® transnazálne sondy

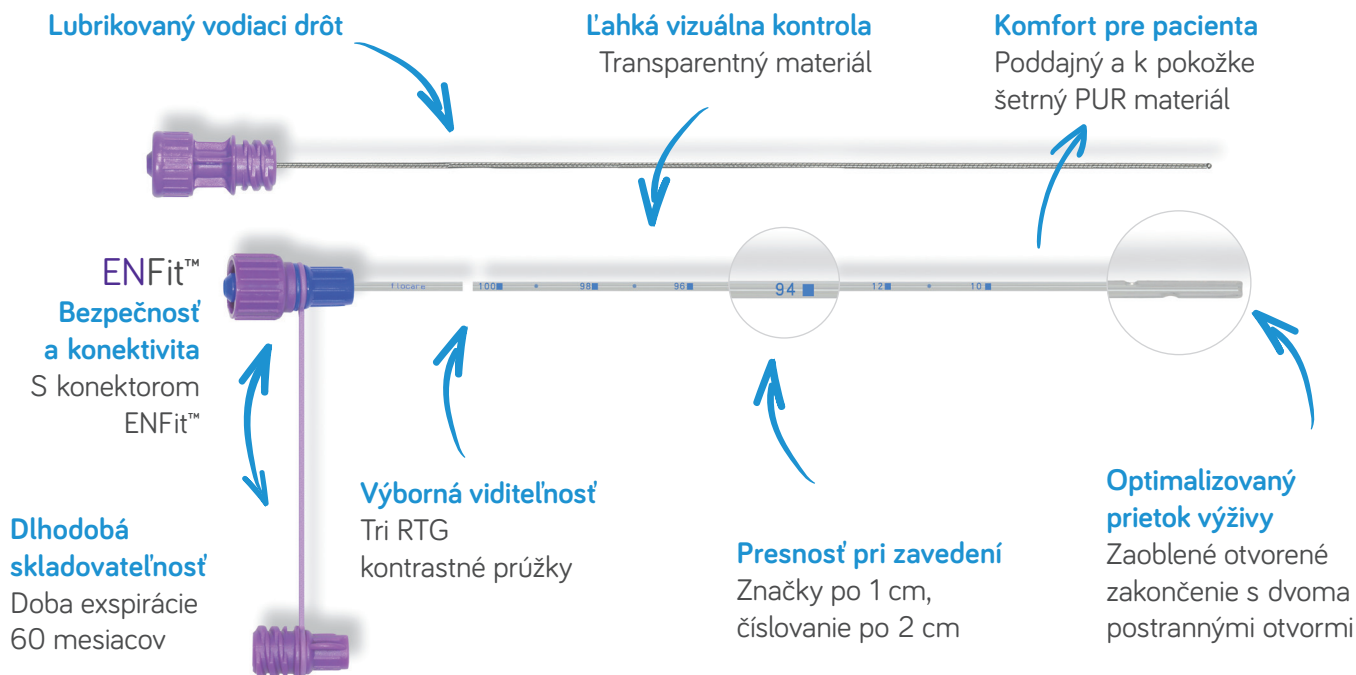


- Nazogastrická RTG kontrastná polyuretánová sonda s vodiacim drôtom a konektorom ENFit™ na optimálne strednodobé živenie do žalúdka (≤ 6 týždňov).
- Ľahko sa zavádza a prináša maximálny komfort pre pacienta.



8

Flocare® Pur Tube (Ch8-110 cm) Sonda polyuretánová

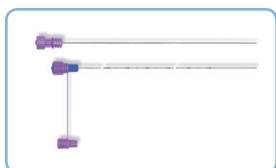

Kód ZP: P22157
REF: 594569

- Nazogastrická sonda
- S otvoreným zakončením
- Priesvit CH 8
- Dĺžka sondy 110 cm



Flocare® Bengmark® NI sondy

Výborná viditeľnosť

Tri RTG kontrastné pružky

Dĺžka sondy 145 cm

Lubrikovaný
vodiaci drôt

Komfort pre pacienta

Poddajný a k pokožke
šetrný PUR materiál

ENFit™

Bezpečnosť
a konektivita

S konektorom
ENFit™

Dlhodobá

skladovateľnosť

Doba expirácie
60 mesiacov

Presnosť pri zavedení

Značky po 1 cm,
číslovanie po 2 cm

Jednoduché zavedenie

Gulôčkové zakončenie
pokryté vrstvou
Hydromer®

Optimálna fixácia
sondy

Patentovaná špirála
Bengmark® s 2,5
slučkami s priemerom
cca 3 cm a dĺžkou 23 cm


- Nazointestinálna rádiokontrastná polyuretánová sonda s dĺžkou 145 cm, s vodiacim drôtom a konektorom ENFit™.
- Vhodná na transnazálne živenie priamo do duodena alebo jejuna.
- Určená na strednodobé živenie pacientov (≤ 6 týždňov).
- Ľahko sa zavádza a prináša maximálny komfort pre pacienta.
- Dostupná v 2 variantoch priesvitu.



8

Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch8-145 cm)

Sonda výživová nazointestinálna

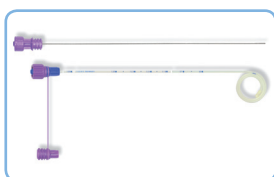

Kód ZP: P76735
REF: 594824



Indikácie sondy Flocare® Bengmark® NI

Táto sonda je indikovaná pacientom s funkčným intestinálnym traktom s oslabenou motilitou žalúdka a/alebo zvýšeným rizikom aspirácie (napr. v ranom pooperačnom období).


Indikácie pre postpylorickú sondovú výživu:

- Chirurgickí pacienti
- Pacienti s popáleninami
- Pacienti so zvýšeným rizikom aspirácie, refluxu a/alebo vracania
- Pacienti s obmedzenou motilitou žalúdka
- Pacienti s akútnou pankreatitídou

10

Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch10-145 cm)

Sonda výživová nazointestinálna

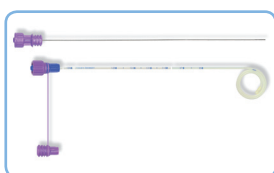


Kód ZP: P76735
REF: 594825



Informácie z návodu na použitie

- 1 Vodiaci drôt celkom zasuňte do sondy a uistite sa, že je pevne uchytený ku konektoru (obr. 1). Informujte pacienta o postupe zavedenia.
- 2 Pacienta umiestnite do pohodlnej polohy posediačky alebo pololežiačky. Pre stanovenie dĺžky sondy Bengmark®, ktorá má byť zavedená, zmerajte vzdialenosť od špičky nosa (A) k uchu (B) a následne k mečovitému výbežku hrudnej kosti (C) – (obr. 2). Sondy v tomto bode označte. Potom urobte dve ďalšie značky 25 cm a 50 cm za prvou značkou.
- 3 Koniec sondy navlhčite vodou pre ľahšiu intubáciu (obr. 3).
- 4 Určite si vhodnú nosnú dierku a sondu zasuňte cez spodnú časť nosnej dierky (obr. 4). V okamžiku, kedy sonda dosiahne oblasť krku, predkloňte hlavu pacienta a požiadať ho, aby prehltal tak často, ako je to možné. Sondy tlačte jemne dopredu, nie silou. Vyvarujte sa nechcenému zasunutiu sondy do trachey! Pokračujte, pokiaľ sa nedostanete k prvej vopred vyznačenej značke. Pozor! V tejto fáze nespájajte nazointestinálnu sondu Bengmark® s výživovacím setom (obr. 5). Predtým než sondou prejde akákoľvek tekutina, je treba overiť jej správne umiestnenie.
- 5 Po kontrole umiestnenia sondy (obr. 6, 7, 8) aplikujte najmenej 20-50 ml vody (obr. 9).
- 6 Vytiahnite ± 25 cm vodiaceho drôtu zo sondy (obr. 10). Potom pokračujte v zavádzaní sondy, kým nedosiahnete druhú značku (obr. 11). Teraz vytiahnite celý vodiaci drôt.
- 7 Sondy ešte nepripevňujte k nosu, dočasne použite na fixáciu ucho.
- 8 V priebehu 8-12 hodín motilita žalúdka posunie sondu cez pylorus (obr. 12). Zafixujte sondu len čo sa tretia značka sondy ukáže pri pacientovom nose (obr. 13).
- 9 Pred podaním akejkoľvek enterálnej výživy overte správne umiestnenie sondy prostredníctvom RTG (obr. 14).

- Podaním nápoja či jedla môžete pozitívne stimulovať pohyb sondy. V prípade potreby (napr. u pediatrických pacientov), je možné dĺžku sondy skrátiť a nasunúť nový Flocare™ konektor s rovnakým Charrière.
- Polohu sondy kontrolujte vždy pri výmene výživy, vždy v prípade pochybností o správnom umiestnení sondy a najmenej 3x denne (obr. 6, 7, 8).
- Sondy preplachujte 20-50 ml vody (obr. 15) pred a po podaní výživy alebo liekov a najmenej každých 8 hodín, aby ste predišli upchatiu sondy.
- Odporúča sa zaviesť novú sondu Flocare® Bengmark® každých 6-8 týždňov (obr. 16).
- Pri aplikácii výživy do čreva sa odporúča vždy používať enterálnu pumpu, aby bolo možné kontrolovať prietok.
- V prípade zachovanej motility žalúdka je možné sondu umiestniť i do žalúdka (preštudujte si príslušné pokyny na použitie), špirála Bengmark® podporuje spontánnu pasáž potravy cez pylorus v rozpätí 8-12 hodín.
- Pokiaľ je u daného pacienta výrazne obmedzená alebo žiadna žalúdočná motilita, sondu je možné presunúť cez pylorus ďalej pomocou alternatívnej techniky, napr. s využitím endoskopie alebo fluoroskopie. Alternatívne je možné žalúdočnú motilitu zlepšiť prostredníctvom medikácie.
- Sondy Flocare® Bengmark® je možné vyňať jemným vytiahnutím z pacientovho nosa. Vyňatie sondy je treba vždy vykonať pod lekárskej dohľadom.

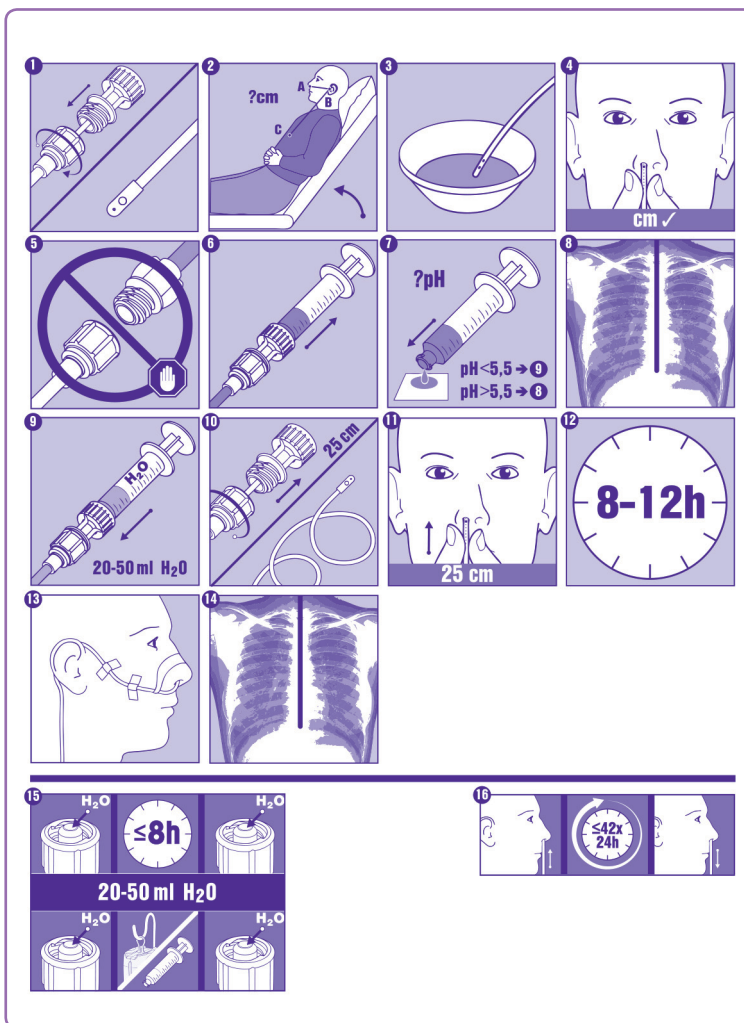

Pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky je nutné prečítať celý návod na použitie.

Flocare® PEG súpravy

Jednoduché zavedenie

Zakončenie pokryté vrstvou Hydromer®

Komfort pre pacienta

Veľmi trvanlivý, poddajný a k pokožke šetrný materiál.

Výborná viditeľnosť

Tri RTG kontrastné pružky

Presnosť pri zavedení

Značky po 1 cm, číslovanie po 2 cm

ENFit™

Mimoriadna bezpečnosť


Modrá fixačná svorka a konektor ENFit™

Kvapkovitý tvar silikónového vonkajšieho kotúča

Dlhodobá skladovateľnosť

Doba expirácie 60 mesiacov

- Súprava Flocare® PEG pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu (PEG) je určená na zavedenie pomocou techniky „pull“, pri súčasnej endoskopickej kontrole.
- Zavedenie sondy PEG je indikované pri dlhodobom podávaní výživy pomocou sondy a pri žalúdočnej dekompresii.
- Dĺžka sondy 40 cm, dostupná vo verziách CH 10, CH 14 a CH 18.
- Súpravu CH 18 je možné využiť tiež na zavedenie PEG/ J.

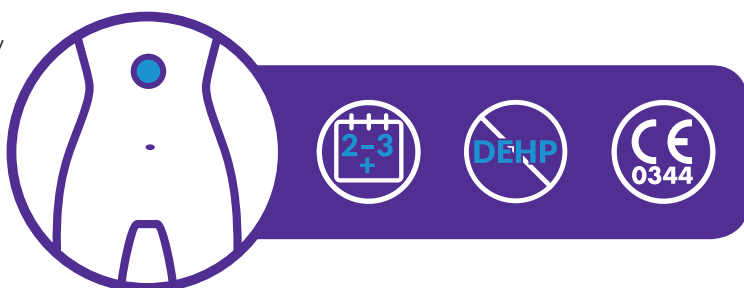

10 Flocare® PEG Set (Ch10)

Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu



Kód ZP: P76734
REF: 594820



14 Flocare® PEG Set (Ch14)

Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu



Kód ZP: P76734
REF: 594821



18 Flocare® PEG Set (Ch18)

Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu



Kód ZP: P76734
REF: 594822




Súčasti súpravy:


- 1 Transparentná PUR sonda s dĺžkou 40 cm, vnútorný silikónový fixačný disk
- 2 Vonkajší silikónový kotúč pre maximálne pohodlie pacienta
- 3 Modrá fixačná svorka sondy
- 4 Skalpel
- 5 Zavádzacia ihla s trokárom
- 6 Drôt s očkom na pohodlné a bezpečné napojenie na slučku sondy
- 7 ENFit™ konektor na podávanie výživy
- 8 Rýchlo uvoľniteľná svorka

Náhradné PEG konektory dostupné ako samostatné diely (pozrite str. 18):
Flocare® PEG connector (CH 10 / CH 14 / CH 18)

Flocare® PEG/J sonda

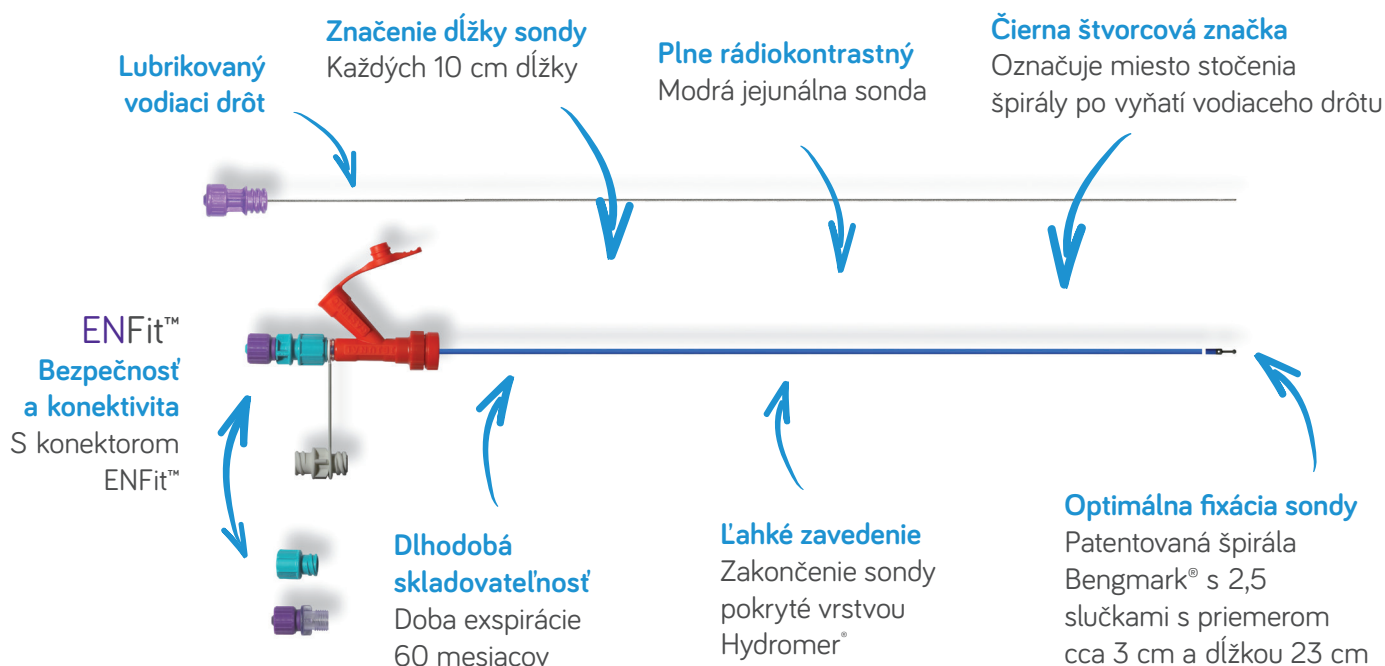


- Polyuretánová modrá sonda CH 9 s dĺžkou 105 cm, určená na endoskopické umiestnenie do jejuna cez sondu PEG CH 18.
- S vodiacim drôtom, patentovanou Bengmark® špirálou a anténym zakončením sondy.
- S konektorom ENFit™.
- SONDA PEG/J je určená na dlhodobé živenie do jejuna.
- Výhoda použitia PEG/J sondy je predovšetkým v diskretnom umiestnení pod odevom pacienta a vyhnutiu sa podráždeniu pokožky v okolí nosa.

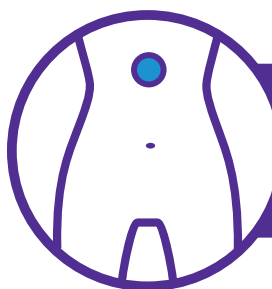

9

Flocare® Bengmark® PEG/J for use with Flocare® PEG CH 18 (Ch9-105 cm)

Sonda výživová jejunálna na použitie s Flocare® PEG CH18

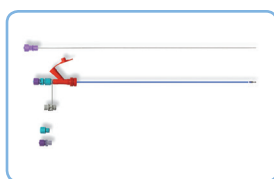


Kód ZP: P76737
REF: 594823



Časti sondy:


Sonda (A), anténne zakončenie s dvoma bočnými otvormi (B), prelubrikovaný kovový vodiaci drôt, čiastočne zasunutý do sondy (C) ENFit™ konektor: fialová (D) a tyrkysová (E) časť umožňujú spojenie jejunálnej sondy s Y-konektorom. Gastrické ústie Y konektora (F) je vybavené lievikovitým konektorom, ktorý umožňuje spojenie stupňovitého konektora s drenážnym vakom. Jejunálne ústie Y-konektora (G) je zostavené a pripojené k jejunálnej sonde Y-konektora (červený): umožňuje dekompresiu žalúdka (aspiráciu žalúdočného obsahu) a zároveň živenie do tenkého čreva. Y-konektor zahŕňa vnútorný neoddeliteľný krúžok (H) pre pripojenie k súprave PEG, a ďalej samostatný – oddeliteľný, červený krúžok – maticku (I) pre pevnú fixáciu spojenia s PEG. Tyrkysový krúžok (J) v hornej časti Y-konektora umožňuje spojenie s jejunálnou sondou. Náhradné konektory pre fixáciu po umiestnení sondy do jejuna: transparentná (K) a tyrkysová časť (L)

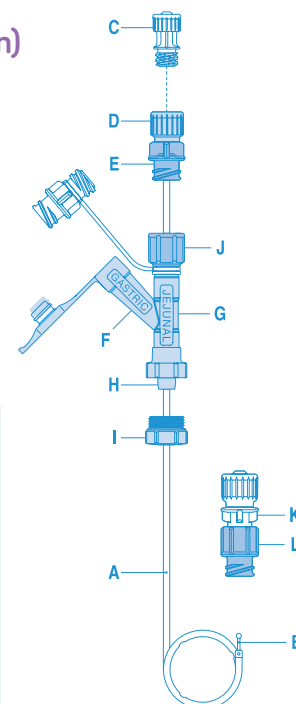


NUTRICIA
flocare

POMÔCKY NA APLIKÁCIU ENTERÁLNEJ VÝŽIVY

Ostatné pomôcky a príslušenstvo

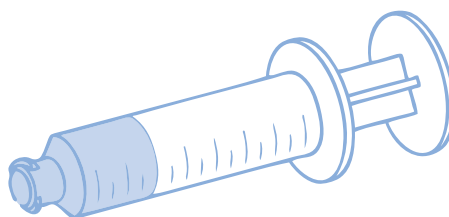

Enterálna pumpa Flocare® Infinity™

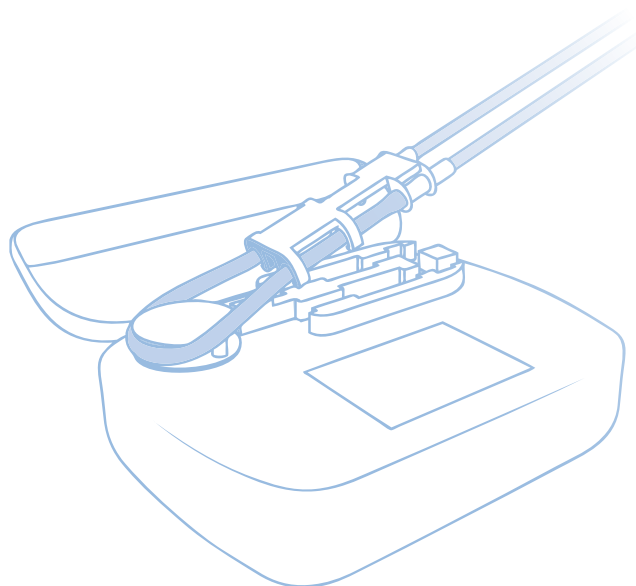

- malá, kompaktná, praktická
- spoľahlivé, bezpečné a jednoduché použitie
- výdrž batérie 24 hodín
- ľahko umývateľná i pod tečúcou vodou
- zákaznícka podpora (pravidelné technické kontroly a servis)
- zdravotnícka pomôcka

Enterálna pumpa Flocare® Infinity™



Kompaktná a ľahká
Rozmery 14 x 9,5 x 3,5 cm,
hmotnosť 392 g

Jednoduché a intuitívne ovládanie

Presnosť prietoku s odchýlkou max. $\pm 5\%$
Pri použití súpravy Flocare® Pack Set/Pack Mobile Set

Detekcia vzduchových bublín

Funguje v akejkoľvek pozícii
(je možné ju otáčať o 360°)

Anti-free flow mechanizmus

Jednoduché použitie
Praktická a užívateľsky príjemná

Ochrana proti prúdu vody IPX 5
Pre ľahké čistenie aj pod tečúcou vodou

S prehľadným, podsvieteným LCD displejom

24-hodinová prevádzka na batérie
Doba dobíjania 6 hodín

Zákaznícka podpora
Pravidelné BTK (bezpečnostno-technická kontrola) i zabezpečenie servisu

Flocare® Infinity® Enteral Feeding Pump

Pumpa výživová enterálna




Kód ZP: P85008
REF: 35676

Pumpa je určená na aplikáciu enterálnej výživy iba prostredníctvom týchto aplikačných súprav:

- Flocare® Infinity™ Pack Set (REF: 586 514)
Kód ZP: P96623



- Flocare® Infinity™ Pack Mobile Set W/O MP (REF: 586484)
Kód ZP: P96624

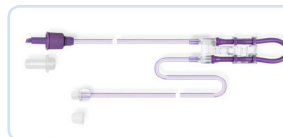

Prehľad konektorov a adaptérov

Zdravotnícke pomôcky

Bolusový adaptér na striekačku ENFit™

- Adaptér na hrdlo vaku umožňuje natiahnutie bolusovej dávky enterálnej výživy priamo z vaku do striekačky ENFit™.

Flocare® Bolus Adaptor Flocare® Bolusový adaptér na striekačku



Kód ZP: P98779
REF: 589 740

● Balenie 1 ks

Univerzálny adaptér na fľašu

- Adaptér je určený na podanie sondovej enterálnej výživy z fliaš s hrdlom Ø 40 mm a Ø 26 mm. Je kompatibilný s fľašami prípravku Infatrini 125 ml, Infatrini Peptisorb 200 ml a Nutrini 200 ml.

Flocare® Universal Adapter Cross Design Flocare® Univerzálny adaptér na fľašu



REF: 570 063

● Balenie 1 ks

Nutricia Flocare® PEG konektory

- Náhradné konektory pre aplikáciu výživy do PEG s ENFit™ konektorom. Kompatibilné s Nutricia Flocare ENFit™ enterálnou striekačkou i výživovými súpravami.

Flocare® PEG Connector

10 CH10



Kód ZP: P98780
REF: 591397

● Balenie 1 ks

Flocare® PEG Connector

14 CH14



Kód ZP: P98780
REF: 591395

● Balenie 1 ks

Flocare® PEG Connector

18 CH18



Kód ZP: P98780
REF: 591396

● Balenie 1 ks

Prechodné konektory

- Prechodné konektory Nutricia Flocare® zaisťujú kompatibilitu systému ENFit™ s ostatnými systémami enterálnej výživy


Transition Step Connector to Funnel Tube Prechodný stupňovitý konektor



REF: 589828

● Balenie 30 ks (6x5 ks)

Transition Connector to Reversed Luer Medport Prechodný konektor na sondu Luer

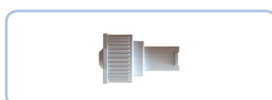

REF: 589733

● Balenie 30 ks (6x5 ks)

Transition Connector to Oral/Luer Syringe Prechodný konektor na striekačku Oral/Luer



REF: 589738

● Balenie 30 ks (6x5 ks)



Transition Connector to Female Luer Syringe Prechodný konektor na set Luer



REF: 589735

● Balenie 30 ks (6 x 5 ks)

Prehľad produktov

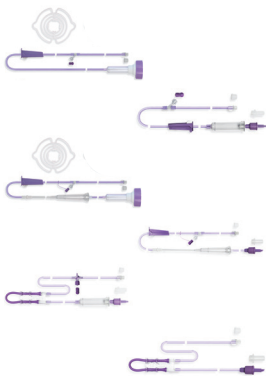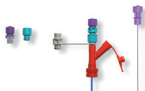Názov produktu	Obrázok produktu	Kód ZP	REF kód	Balenie
Nutricia Flocare® výživové súpravy				
Flocare® Gravity Bottle Set		P96622	590 070	1 ks
Flocare® Gravity Pack Set		P96621	586 460	1 ks
Flocare® 800 Bottle Set		P96620	590 082	1 ks
Flocare® 800 Pack Set		P96619	586 512	1 ks
Flocare® Infinity Pack Set		P96623	586 514	1 ks
Flocare® Infinity Pack Mobile Set W/O MP		P96624	586 484	1 ks
Nutricia Flocare® PEG sety				
Flocare® PEG Set (Ch10)		P76734	594 820	1 ks
Flocare® PEG Set (Ch14)		P76734	594 821	1 ks
Flocare® PEG Set (Ch18)		P76734	594 822	1 ks
Nutricia Flocare® sondy Bengmark®				
Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch8-145 cm)		P76735	594 824	1 ks
Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch10-145 cm)		P76735	594 825	1 ks
Nutricia Flocare® sonda PEG/J				
Flocare® Bengmark® PEG/J for use with Flocare® PEG CH 18 (Ch9-105 cm)		P76737	594 823	1 ks
Nutricia Flocare® sondy				
Flocare® PUR Tube (Ch8-110 cm)		P22157	594569	1 ks
Nutricia ENFit® enterálna striekačka				
D-3NTERAL™ Enteral Syringe 60 ml Single Use ENFit®		P1074A	624023	1 ks
Nutricia Flocare® enterálna pumpa				
Flocare® Infinity® Enteral Feeding Pump		P85008	35676	1 ks



www.e.nutricia.sk

Distribúcia: Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Infolinka: 0800 444 006
www.e.nutricia.sk

Zdravotnícke pomôcky a aplikačný materiál sú určené na podanie enterálnej výživy.

Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.

Starostlivo si prečítajte návody zdravotníckych pomôcok na www.e.nutricia.sk



NUTRICIA
floca↑re®